



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Массажный пояс Vibro Shape



СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	3
2. Ограничения по использованию.....	3
3. Комплектация	4
4. Особенности.....	4
5. Функции клавиш	5
6. Использование.....	5
7. Меры предосторожности	6
8. Технические характеристики	7
9. Рекомендации	7

1. Введение

Vibro Shape — это мощный массажёр, который использует пульсирующие движения, которые способствуют похудению и приданию тонуса различным мышцам на теле. Он обеспечивает не только комплексное тонизирование, но также снимает стресс и улучшает общее состояние здоровья - идеальное решение для активного образа жизни!

- Помогает отделить жир, который затем удаляется из организма через лимфатическую систему.
- Способствует хорошему пищеварению и ровному цвету кожи лица за счет улучшения способности организма усваивать питательные вещества.
- Мягкое рассеивание тепла помогает стимулировать кровообращение.
- Тонизирует и лечит все основные группы мышц, что приводит к улучшению спортивной формы, эффективно проводит разминку, что снижает количество травм при занятиях спортом.
- Стимулирует и массирует глубокие мышцы, оказывая физиотерапевтический эффект и улучшая подвижность.


2. Ограничения по использованию

- Не используйте во время беременности.
- Если вы получаете какое-либо специализированное лечение, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем пытаться использовать вибромассажер.
- Немедленно прекратите использование при появлении необычных симптомов или плохом самочувствии.
- Не оставляйте изделие подключенным к сетевой розетке — отключайте его, когда оно не используется.
- Не разбирайте, не модифицируйте и не пытайтесь отремонтировать массажер.
- Не пытайтесь использовать его мокрыми руками.
- Никогда не используйте поврежденный шнур питания, вилку или розетку.
- Не используйте при высокой температуре или влажной среде.

3. Комплектация

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.

- Массажный пояс – 1шт;
- Пульт управления – 1шт;
- Адаптер – 1шт;
- Инструкция – 1шт.

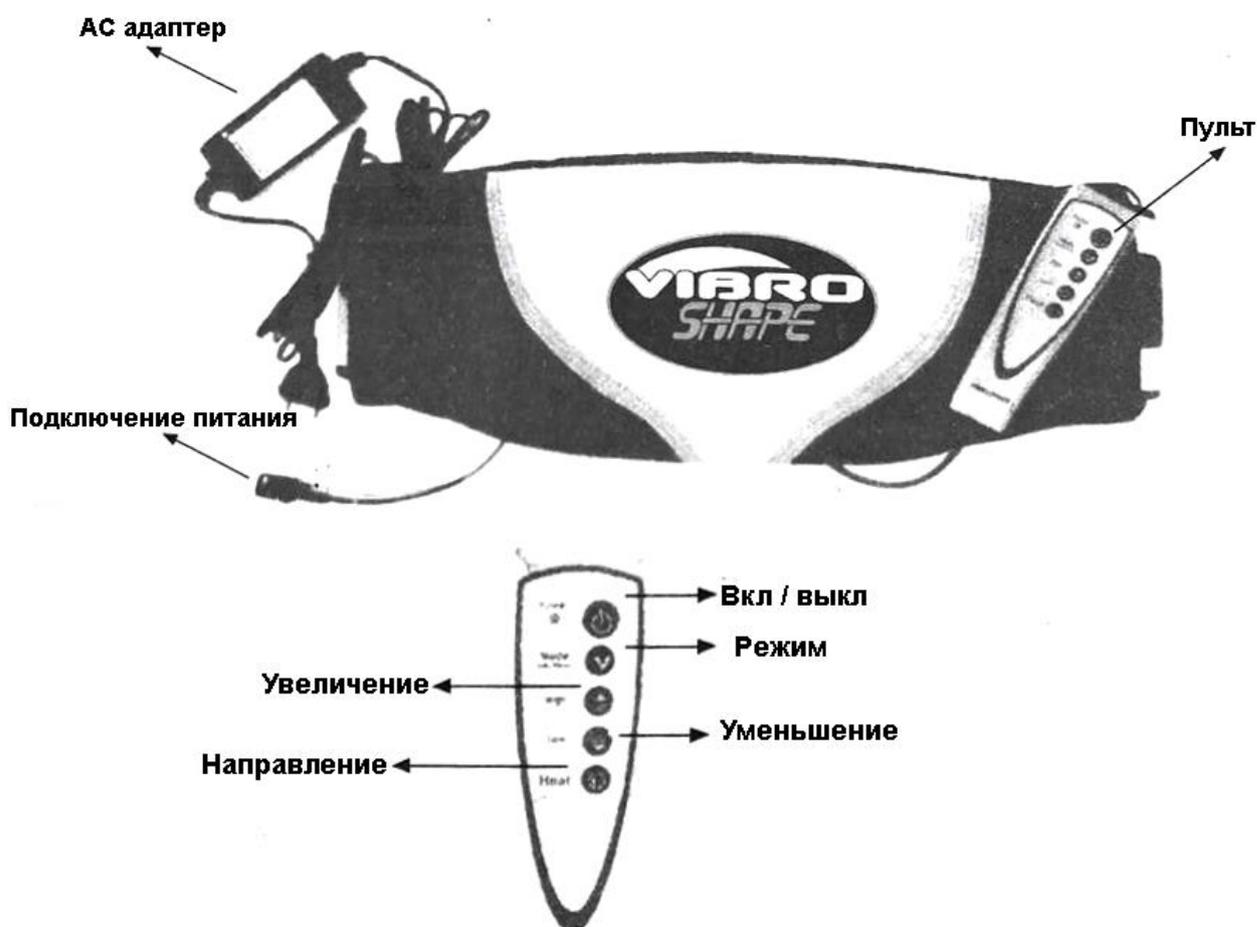

4. Особенности


- Автоматический режим
- Ручной режим
- 5 уровней
- Функция подогрева (между 31°C и 42°C)
- Вращение по и против часовой стрелки
- Автоотключение через 10 минут работы

5. Функции клавиш

- Режим – нажмите кнопку, чтобы переключиться между режимами.
- Регулировка уровней – нажимайте кнопки Увеличение и Уменьшение, чтобы увеличить или уменьшить соответственно силу воздействия.
- Направление – нажимайте кнопку, чтобы сменить направление вращения массажера.
- Включение и отключение – нажмите кнопку вкл/выкл для включения или отключения устройства. Либо подождите 10 минут, через 10 минут работы массажер выключится автоматически.


6. Использование

1. Плотно оберните пояс вокруг тела, отрегулируйте размер и застегните на липучку.
2. Подсоедините адаптер к точке подключения питания массажера.
3. Вставьте адаптер в розетку, убедившись, что напряжение в розетке совместимо с напряжением адаптера. После подключения на пульте загорится зеленый индикатор.
4. Нажмите кнопку Вкл/Выкл один раз, чтобы включить массажный пояс. Устройство теперь будет работать в автоматическом режиме, пока не будет нажата кнопка выбора режима. После нажатия, массажер перейдет в ручной режим.
 - Авторежим (горит зеленый индикатор)
В автоматическом режиме пояс начнёт работать на уровне 2, затем будет постепенно увеличивать силу воздействия. Используйте кнопки Увеличение и Уменьшение, чтобы выбрать стартовый уровень воздействия. Минимальный уровень – 1, максимальный – 2.

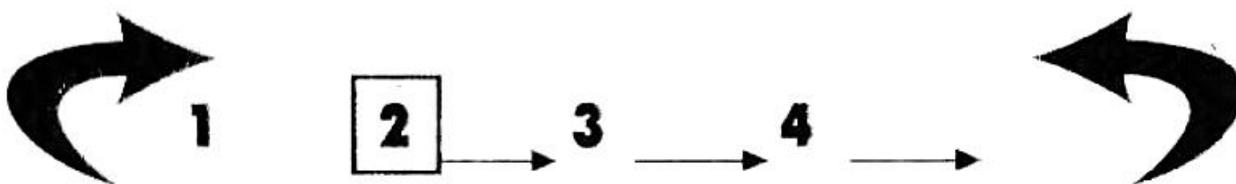

- Ручной режим (горит красный индикатор)

В ручном режиме пояс начнёт работать на уровне, который был выбран. Используйте кнопки Увеличение и Уменьшение для регулировки.

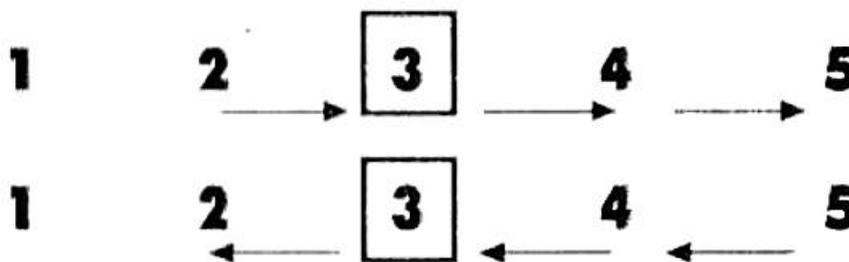

5. При нажатии кнопок Увеличение и Уменьшение будет звучать звуковой сигнал. Если нет звукового сигнала, достигнут максимальный или минимальный уровень соответственно.
6. Сменить режим работы можно в любой момент нажатием на кнопку Режим.
7. В ручном режиме нажмите кнопку Направление, чтобы выбрать направление вращения по часовой стрелке или против часовой стрелки.
8. Во время использования устройство будет распространять тепло от 31 °С до 65 °С - температура будет меняться каждую минуту. Два вентиляционных отверстия, размещенные поверх ремня, предотвратят его перегрев.
9. Устройство может быть выключено в любое время. В качестве альтернативы встроенный таймер автоматически остановит массажер через 10 минут работы.

7. Меры предосторожности

- При обычном использовании пояс и адаптер нагреваются.
- Вынимайте устройство из розетки, когда оно не используется. Не оставляйте включенным.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Всегда убирайте на хранение в прилагаемый чехол для хранения.
- Никогда не храните во влажной или перегретой среде.


- Не растягивайте массажный пояс и провода. Не кладите на них тяжелые предметы или объекты с острыми краями.
- Очищайте по мере необходимости ремень от пыли или пятен, протирая мягкой тканью и мягким моющим средством. Чистите только когда он не используется, отключен от сети и полностью остыл.

8. Технические характеристики

Название устройства	Vibro Shape
Номер модели	MC0138
Входное напряжение	220-240 В, 50 Гц
Выходное напряжение	24 В
Потребляемая мощность	55 Вт

9. Рекомендации

- Не прокалывайте изделие.
- Используйте устройство только вместе с прилагаемым адаптером:
 - Модель: GPE601;
 - Входное напряжение: 100-240 В; 1,5 А;
 - Выходное напряжение: 24 В – 2,0 А.

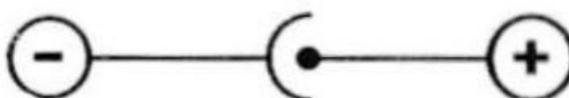

- Внимательно осмотрите массажный пояс на наличие признаков износа и/или повреждений перед первым использованием. Если такие признаки обнаружены, пожалуйста, верните поставщику.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**